

锐赛 RESEE智能人体健康秤

产品使用说明书

保修卡

感谢您购买锐赛 RESEE智能人体健康秤系列产品

使用前请认真阅读此说明书和保修卡



产品使用说明书


- 1.为保证测量准确度，请避免在以下情况测量：
- 剧烈运动后
 - 沐浴或桑拿后
 - 暴饮暴食后
 - 大量饮水或饮酒后
 - 感冒发烧中
- 2.请尽量保持每天在同一时间，同一条件下测量，以下为推荐测量时间：
- 早饭前空腹测(8AM前)
 - 午饭前空腹测(12PM前)
 - 晚饭前空腹测(6PM前)
- 3.建议使用充电器：输出DC 5V, 1A，或三节1.5V七号干电池。
- 4.请将产品放在坚硬平坦地板，请勿放置在地毯或其它软质地面，否则将引起测量数据不准确。




请将放置在平坦坚硬的地面

- 5.每次测量前清零。
- 清零方法：轻踩秤面后下秤，屏幕数字会自动回到0.00kg。

按键操作

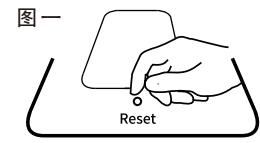

开机后，可用手指按压电子秤背面Reset键进行单位kg/lb或 若斤(g)的转换(具体以公司产品型号为准)

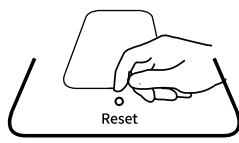

称重时，可用手指按压电子秤背面Reset键长压约3秒，设备将进行复位恢复(设备出现异常时使用)

安全注意事项

使用前务必详细阅读安全注意事项

- 请勿在产品打滑的地面及地板使用
- 人体秤打滑可能会使您摔倒受伤。
- 请勿使用劣质、不合格、破损的充电器进行充电。

显示说明

图二

正常

图三

正在清零校正

图四

低电量提示

图五

显示EEr 称重超载

图六

红色闪烁，电量不足；红色常亮，表示充电中

图七

显示绿色 表示充电完成

产品规格

产品尺寸: 300X300X27mm	重量: 1.4kg	电池: 3.7V锂电池或三节1.5V七号干电池
分度值: 0.05kg(100kg以下)	0.1kg(100kg以上)	
称重范围: 0.2kg~150kg(开机启动重量7kg)		
建议使用环境温度: +5℃~+35℃	建议储存温度: -20℃~+60℃	

单位转换

当LCD显示时，按秤底部转换开关(如图一)，可做kg或者lb单位转换。

自动关机

称重完成后，或对秤没有任何操作，秤会在大约10秒后自动=关机。

低电量提示

当电池电量不足时，秤会显示“Lo”（如图四），请及时更换电池或者充电。

超载提示

如果体重超过180kg，秤会显示“oL”（如图五）提示符，请采用其他称重方式，以免损坏产品。

安全注意事项

使用前务必详细阅读安全注意事项

- 请勿在产品打滑的地面及地板使用
- 人体秤打滑可能会使您摔倒受伤。
- 请勿使用劣质、不合格、破损的充电器进行充电。

产品保修卡

感谢购买本产品，为保障您的权益，请在购买后仔细阅读以下内容：

保修服务内容

- 本产品免费保修期为一年（自购买凭证之日起算），在有效保修期内，凡属于产品本身引起的故障，可凭购买凭证和保修卡联系经销商进行免费维修。
- 请妥善保管购买凭证和产品保修卡作为保修凭证；如您不能出示以上证明或购买凭证一经涂改，保修自行失效。

下列情况不属于免费维修范围，我司可提供有偿服务，敬请注意

- 未按说明书要求使用、维护、保管导致产品故障或损坏。
- 超出保修期限
- 无保修卡及有效购买凭证
- 未经本公司许可，擅自改动本身固有的零件或擅自拆机维修
- 意外因素或人为导致产品损坏;如进水、机械破坏、摔坏等。

商品性能故障表

名 称	性 能 故 障
体重秤	说明书所列功能失效 无法开机，不能正常称重 屏幕无显示/错字/漏划 因结构或材料因素造成的外壳裂纹

制造商：深圳市锐赛科技有限公司
Shenzhen Resee Technology Co., Ltd.
地址：深圳市宝安区沙井镇蚝二岗头工业区大埔南路三号厂房
Address: North district, the NO.3Building, Dapu South, Road, Haoer Gangtou Industry Zone, Shajing, Baoan District, Shenzhen
Tel.: +86-755-6111 8833 FAX: +86-755-6111 8833
Mail: sales@reseetech.com.cn
Http: www.reseetech.com.cn